


Ambu® Neuroline Agujas Subdérmicas y Ambu® Neuroline Agujas Subdérmicas con cables entrelazados

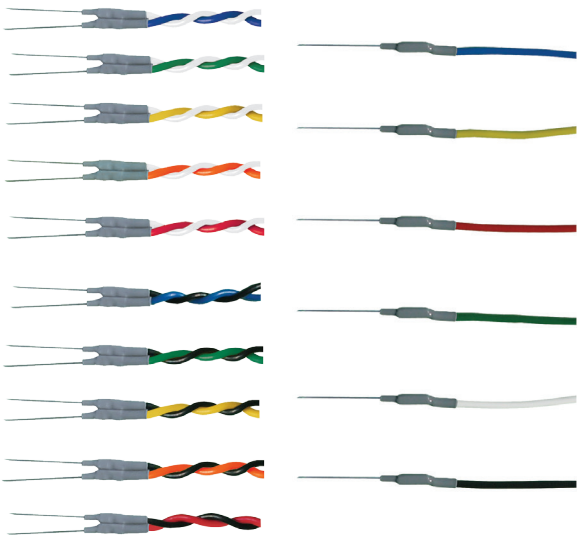

Características

- Punta ultra aguda en forma de lanza, para una baja resistencia de penetración
- Baja impedancia, minimizando el ruido para dar una señal clara y fiable
- Hechas de acero inoxidable, ofrecen la combinación óptima de fuerza y flexibilidad
- Cables suaves de colores

Aplicaciones Recomendadas

Ambu Neuroline Agujas Subdérmicas

- Electroencefalograma (EEG)
- Potenciales evocados (PE)
- Monitorización Intraoperatoria (MIO)

Ambu Neuroline Agujas Subdérmicas con

- cables entrelazados
- Potenciales evocados (PE)
- Monitorización intraoperatoria (MIO)

Las agujas subdérmicas desechables de Ambu Neuroline le ofrecen la confianza y fiabilidad que son necesarias en el quirófano y en su consulta.

Las agujas están hechas de acero inoxidable. La punta de las agujas está afilada con precisión en forma de lanza ultra aguda, para una fácil penetración en la piel. Además, las agujas ofrecen un nivel bajo de impedancia, minimizando el ruido y optimizando la calidad de la señal.

Las agujas Subdérmicas Ambu Neuroline se encuentran disponibles también por pares con cables entrelazados. Esta modalidad le ofrece la ventaja adicional de minimizar el ruido y las interferencias. Los pares de colores son: negro/blanco, negro/rojo, negro/azul, negro/amarillo y negro/verde.

Especificaciones

Medio ambiente	
PVC-en electrodo	Si
Látex-en electrodo	No
PVC-en cable	Si
Látex-en cable	No
PVC-en embalaje	No



M = 1.5 mm

Materiales

Subdérmicas	
Aguja	Acero inoxidable
Cable	Cobre estañado con aislante de Cloruro de Polivinilo (PVC)
Conexión	Bronce Fosforoso
Cobertura de plástico	Polietileno (PE)
Tipo de conector	1.5 mm (DIN 42 802)
Método de esterilización	Óxido de etileno
Materiales del embalaje	
Bolsa, parte interna	Poliéster (PET)
Bolsa, parte central	Polipropileno (PP)
Bolsa, parte extrema	Papel
Caja	Cartón



Temperatura de almacenamiento

Configuraciones disponibles

Referencia	Largo del cable	Medida Aguja	Calibre		Color de los cables	Caducidad (meses)	Embalaje		
	cm	mm	(mm)	(G)			(bolsa cerrada)	Bolsa	Caja
Subdérmicas									
745 12-50/24	50	12	0.40	27G		60	1	24	384
745 12-100/24	100	12	0.40	27G		60	1	24	384
745 12-150/24	150	12	0.40	27G		60	1	24	384
745 12-250/24	250	12	0.40	27G		60	1	24	384
Twisted Pair Subdérmicas									
74612-100/1/20	100	12	0.40	27G		60	1	20	160
74612-150/1/20	150	12	0.40	27G		60	1	20	160
74612-200/1/20	200	12	0.40	27G		60	1	20	160
74612-250/1/20	250	12	0.40	27G		60	1	20	160



Cables: 5 pares de colores cada uno con un cable negro y los mismos 5 pares de colores con un cable blanco.
Cada caja contiene 2 piezas de cada par

Instrucciones

1. Abra la bolsa estéril y extraiga la aguja.
2. Conecte la aguja al equipo.
3. Extraiga el tubo protector.
4. Después de su uso, deposite la aguja en un contenedor designado para ese uso.

Precauciones

1. Las agujas subdérmicas son desechables y para uso en un sólo paciente.

Subsidiaria
Firma Ambu S.L
Alcalá 261-265, Edf. 2-3º dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
F: (+34) 91 564 50 82
www.ambu.es

Fabricante
Ambu A/S
DK - 2750 Ballerup
www.ambu.com